

GRÁNULOS DE HUESO ESPONJOSO EN APLICADOR

Gránulos córtico-esponjosos

Origen: Humano
 Tejido: Tejido óseo esponjoso
 Preparación: Proceso de limpieza Allotex®
 Inactivación: Min. SAL10⁶ para virus y bacterias
 Esterilización: Radiación gamma
 Aplicación: Relleno de vacío de hueso
 Rehidratación: Min. 10 minutos

El aplicador de C⁺TBA es un envase primario especial para los gránulos de hueso esponjoso, que facilita significativamente tanto la rehidratación con un medio fisiológico como la introducción de los gránulos en la zona del defecto.



INFORMACIÓN DEL PEDIDO*

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO	VOLUMEN [cc]
Gránulos de hueso esponjoso en aplicador	ALO360	7
	ALO361	15
	ALO362	30



* Tenga en cuenta: con respecto a la calidad del tejido donado y los procedimientos de producción, pueden producirse ligeras desviaciones.

Silverstein Medical SL
 Calle Francisco Alonso 2
 28660 Boadilla del Monte, Madrid, España

Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH
 Magnesitstraße 1
 A-3500 Krems an der Donau

+34 658 81 00 30
 compras@silverstein.es
 www.silverstein.es

+43 2732-76954-0
 +43 2732-76954-60
 office@ctba.at
 www.ctba.at




Formulario de solicitud

Manejo

El aplicador de C + TBA es una forma especial de envasado primario para gránulos de hueso esponjoso, que simplifica significativamente tanto la introducción de los gránulos en la zona del defecto como la rehidratación con un medio fisiológico.



1. Desatornille la tapón de cierre 1.
2. Recoger un medio fisiológico (p. Ej., Solución de cloruro de sodio) para rehidratar los gránulos de hueso esponjoso. El pistón del aplicador debe moverse hacia arriba y hacia abajo varias veces hasta que el granulado esté completamente cubierto de líquido.
3. A continuación, vuelva a cerrar el aplicador con el tapón de cierre 1.
4. Deje los gránulos de hueso esponjoso en el medio fisiológico durante al menos 10 minutos.
5. Después de la rehidratación, desenroscar el tapón de cierre 1 y eliminar el exceso de líquido presionando el émbolo. Luego desenrosque la tapón de cierre 1 del cuerpo del aplicador.
6. Traer los gránulos de hueso esponjoso mediante aplicador directamente en el área del defecto.

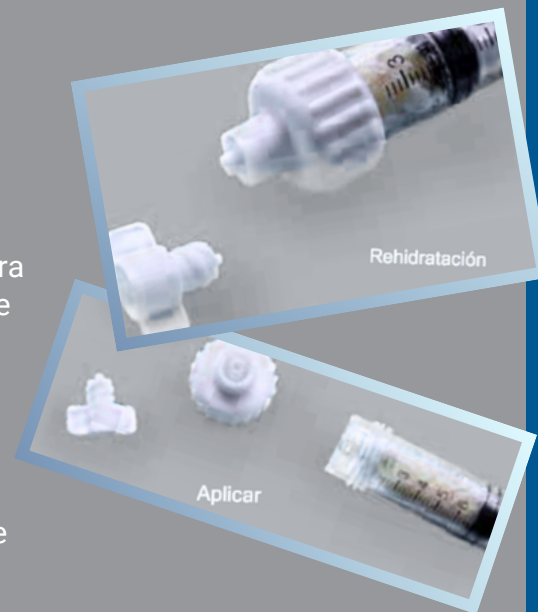

Silverstein Medical SL
Calle Francisco Alonso 2
28660 Boadilla del Monte, Madrid, España

Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH
Magnesitstraße 1
A-3500 Krems an der Donau

+34 658 81 00 30
compras@silverstein.es
www.silverstein.es

+43 2732-76954-0
+43 2732-76954-60
office@ctba.at
www.ctba.at



Formulario
de solicitud